



DELPHIN



Poollift für selbstständigen Zugang zu Ihrem Schwimmbecken

Der Poollift Delphin dient als praktische Hilfe beim Ein- und Ausstieg aus dem Schwimmbad. Die einfache Bedienung ermöglicht die selbstständige Benutzung des Liftes, ohne die Notwendigkeit einer Hilfsperson. Der Sitz dreht automatisch um 90° und ein Bedienhebel über, sowie unter Wasser, ermöglicht eine sichere Bedienung.

Der Poollift Delphin ist gänzlich aus hochwertigem Edelstahl 316 gefertigt.

Es bedarf keiner Unterwasseranmontage. Es ist nur ein Befestigungspunkt neben dem Beckenrand. Der Betrieb erfolgt durch den Anschluss an das Haushaltswassersystem, welches mit einem herkömmlichen Wasserschlauch zum Poollift geführt wird. Dies garantiert eine einfache Installation sowie einen geringen Wartungsaufwand.

POOLLIFT

Einfache Montage

Der Lift benötigt nur einen Befestigungspunkt außerhalb des Beckens. Dies ermöglicht eine schnelle Montage mit minimalen baulichen Eingriffen.

Komfort

Die stabile Konstruktion garantiert dem Benutzer eine sichere und sanfte Beförderung in das Schwimmbecken.

Verlässlich

Angetrieben allein durch Wasserdruck (3,8 bar) und ohne elektrische Komponenten!



Die stabile Konstruktion garantiert einen sicheren und sanften Transfer



Selbstständiges und einfaches Umsetzen ohne große Mühe





Steuerungshebel auf Ein- sowie Ausstiegs-
position für eine **komfortable**
Bedienung des Poolliftes.




Das **elegante und robuste**
Design eignet sich für öffentliche
sowie private Pools gleichermaßen

Wesentliche Vorteile des Poollift Delphin

- Selbstständige Benützung - keine
Hilfsperson notwendig
- Hydraulisch betrieben mit nur 3,8 bar
Haushaltswasserdruck. Es ist keine Pumpe
nötig.
- Keine elektrischen Bauteile
- Ansprechendes Design in Edelstahl 316
- Sehr einfache und schnelle Montage
- Keine Befestigung unter Wasser
- Verwendbar für Pools im Innen- und
Außenbereich
- Sicher und verlässlich
- 2 verschiedene Sitzfarben (blau oder weiß)
- 2 Befestigungsvarianten zur Auswahl

Der Edelstahllift eignet sich auch für
Montage an Seen oder Teichen



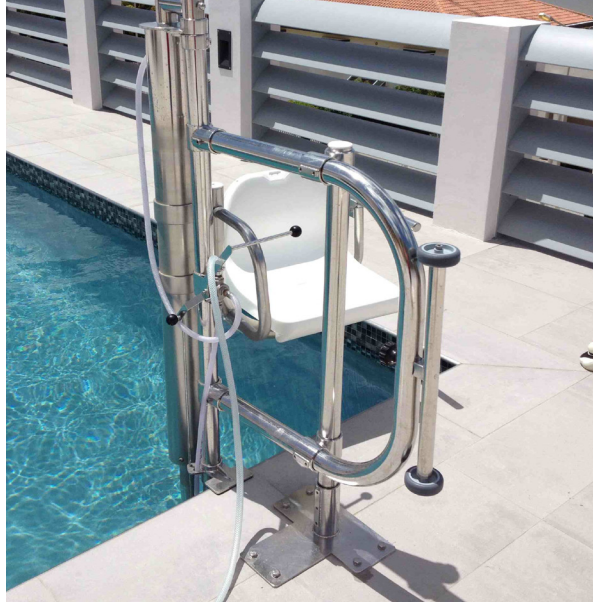

Transportträger (optional) können für den Transport zwischen Pool und Lagerplatz (z. B. zum Überwintern) verwendet werden





Klappbare Armlehnen (optional) sorgen für extra Sicherheit während des Auf- und Abfahrens mit dem Sitz


Poollift - Technische Spezifikationen

Daten

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hubhöhe | 1220mm standard 1067 bis 1600mm optional |
| Traglast | 120 kg |
| Minimaler Wasserdruck | 3,8 bar |
| Minimale Pooltiefe | 1150 mm |
| Befestigung Variante A Versenkte Konsole | Befestigung Variante B Verschraubte Konsole |

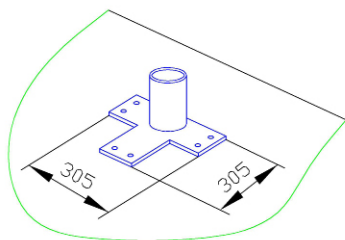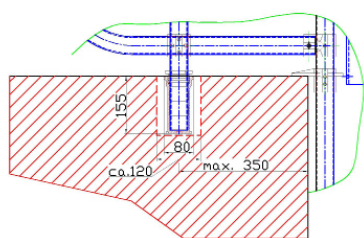

Einbaubeispiel

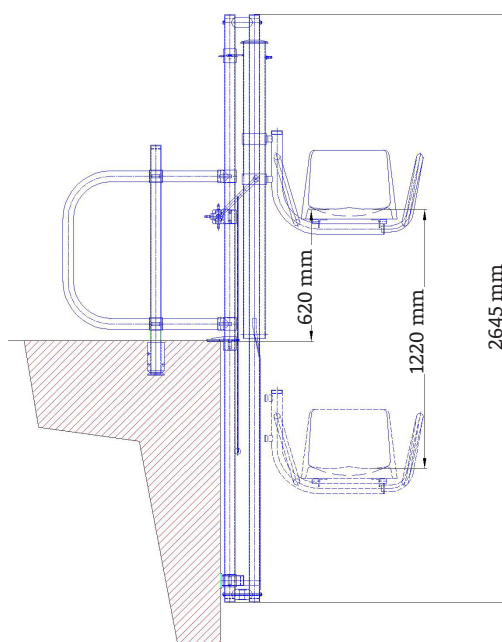

Gemeinsam sorgen wir für Barrierefreiheit!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Plattform Treppenlifte



Stuhl Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollifte

Offizieller
Partner von:

LEHNER
LIFTTECHNIK